


6 使用完畢後

1 將刷頭直直地從主機上拔下

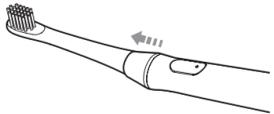


2 用水清洗拔下的刷頭

水洗後，請徹底甩掉水分，並直立放置於刷頭座上。

3 用水清洗主機

請勿損傷刷頭連接桿和主機之間的橡膠部分，亦請勿施加過度力道於刷頭連接桿上。如損傷橡膠部分，可能導致水滲入主機內部，造成故障。

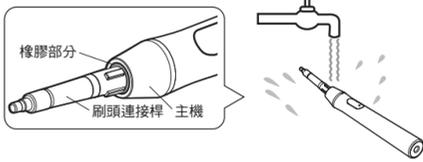

4 擦乾水分並妥善保管

請用乾燥的軟布擦拭主機，並置於通風良好處。放置於充電器時，請勿在潮溼狀態下充電。

7 保養與保管

關於保養

- 刷頭、主機、充電器請常保清潔。
- 若牙刷沾附牙膏而置之不理，可能造成主機表面劣化。
- 請用乾燥的軟布擦拭掉髒污。
- 嚴重髒污時，請將布浸泡在清水或稀釋後的中性清潔劑中，並擰乾後再擦拭，然後用柔軟的乾布擦拭。
- 清潔充電器前，請從插座拔出電源插頭。
- 請注意勿讓水滲入主機內部、充電器內部。
- 請勿將刷頭、主機、充電器浸泡於酒精中，或用超過40℃的熱水消毒。
- 請勿用沾有消毒液的布擦拭。
- 擦拭髒污時，請勿使用石油醚、稀釋劑、乙醇等溶劑。

關於保管

- 請勿存放於以下場所：
 - 潮濕環境
 - 高溫、多濕、陽光直射處，及空氣中含有鹽分、灰塵而易造成影響處
 - 受震動、衝擊處
 - 存放化學品或具有腐蝕性氣體的地方

- 請存放於嬰幼兒、孩童無法拿取之處。

若未遵守上述注意事項及其他正確使用方法，本公司恕不承擔品質的責任。

8 故障排除

發生問題	原因、解決方法
刷頭的動作不穩定	刷頭未正確安裝於主機上。 <ul style="list-style-type: none">▶ 請正確安裝刷頭。 (☞ 4 安裝刷頭)
按了電源按鍵但沒反應、刷頭的振動微弱	充電電池的電量減少。 <ul style="list-style-type: none">▶ 請放置於充電器上充電。▶ 剛購買或長時間放置、使用過程中動作停止時，請充電直到充電完成。 (☞ 3 充電)
主機和充電器些微發熱	產品特性上即會些微發熱。 <ul style="list-style-type: none">▶ 並非故障。對本產品的壽命亦無影響。

發生問題	原因、解決方法
使用後將主機插入充電器，充電指示燈卻未亮燈	充電已完成。 <ul style="list-style-type: none">▶ 充電電池充滿電後，充電指示燈即會熄滅。 電源插頭未連接至插座。 <ul style="list-style-type: none">▶ 請確認插頭已正確連接。(☞ 3 充電) 主機未正確放置於充電器上。 <ul style="list-style-type: none">▶ 請先從充電器上取出，再重新放置。(☞ 3 充電) 若充電指示燈仍未亮燈，則可能是主機發生故障。請聯絡歐姆龍客服中心洽詢維修事宜。
即使已充電，可使用的時間過短或刷頭振動微弱	▶ 使用重點護理模式或在寒冷的場所使用時，可使用的時間會縮短。 <ul style="list-style-type: none">▶ 充電電池可能已達到使用壽命，但是充電電池無法更換。請丟棄主機。(☞ 10 丟棄時)
充電指示燈不熄滅	▶ 若將主機從充電器上取下，或充電達10小時以上，但充電指示燈仍未熄滅，請聯絡歐姆龍客服中心要求維修。
牙齦出血、振動太強、牙齦會痛	剛開始使用電動牙刷的前幾天，牙齦可能會少許出血。 <ul style="list-style-type: none">▶ 通常幾天後即會停止出血。若出血持續2週以上，請停止使用並接受牙醫師的診斷。 牙刷不適合。 <ul style="list-style-type: none">▶ 推薦使用可以輕柔刷牙的超細軟毛刷頭 (SB-182)。

若以上方法仍無法解決，請洽詢歐姆龍客服中心 (☎ 0809-080-880)。

9 產品規格

產品名稱	歐姆龍 音波式充電型電動牙刷 HT-B320-W		
電源電壓	AC100-110 V 50/60 Hz		
消耗功率	約1W (充電時)		
充電方式	電磁誘導方式		
使用電池	鎳氫電池 (Ni-MH 2.4V)		
充電時間	約10小時 (室溫23℃)		
連續使用時間	約40分鐘 (於室溫23℃充滿電後負荷100g，使用清潔模式時) 約3分鐘自動關閉電源 <ul style="list-style-type: none">• 使用重點護理模式時，連續使用時間會較清潔模式縮短。• 由於充電電池的特性，每重複充電後，1次的使用時間會逐漸縮短。若充滿電後使用時間嚴重縮短，則表示電池已達到使用壽命。• 電池無法更換。達到使用壽命後，請丟棄電池和主機。		
模式	清潔模式 重點護理模式		
振動數	清潔模式	約25,500次/分鐘	
	重點護理模式	約33,000次/分鐘	
使用環境條件	+ 5~+ 35℃ /30~85% RH		
保管環境條件	- 20~+ 60℃ /10~95% RH		
產品重量	主機：約64g (含刷頭)，充電器：約130g		
外觀尺寸	主機：全長約230mm (含刷頭)，最大直徑約24mm 充電器：高約35.5×寬約51×縱深約63mm (電源線約120cm) 刷頭座：高約27×寬約96×縱深約30mm		
電源線長度	約120cm		
配件	刷頭 (各1個)	三效潔淨刷頭、小型三效潔淨刷頭	
	其他	刷頭座、充電器、使用說明書	

本公司可能逕行變更產品規格。

關於選購品

刷頭為耗材。當刷頭的刷毛向外翹，即應更換。請至原購買網站購買選購品。

產品名稱	型號	產品名稱	型號
三效潔淨刷頭 (2入)	SB-172	加寬高效潔淨刷頭 (2入)	SB-122
超細軟毛刷頭 (2入)	SB-182	美白去漬刷頭 (2入)	SB-132
牙間刷頭 (2入)	SB-192	小型三效潔淨刷頭 (2入)	SB-142

購買時請務必確認TYPE，使用**TYPE 2**的替換用刷頭。若刷頭TYPE不同則無法使用。

10 丟棄時

丟棄主機時，請取出充電電池。

請遵照居住地政府規定丟棄主機、充電電池和充電器。

請將充電電池用盡，直到按下主機的電源按鍵也不會動作為止。

取出充電電池的方法


此非維修用步驟。拆解之後將無法修復。

1 確認不會動作後將刷頭從主機上取下

2 參考插圖折斷主機

請盡量穿著鞋底堅硬的鞋子，並於地面堅固的場所 (水泥地等) 進行。

- 請勿赤腳進行，否則可能造成受傷。

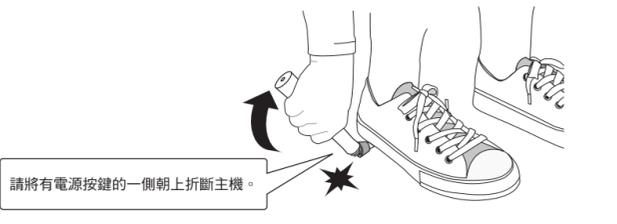

3 將蓋子部分與主機拆開

請確認環狀部分 (銀色) 是否殘留在主機上部。若環狀部份殘留在主機上部請前往步驟4，若未殘留請前往步驟6。

環狀部分 (銀色) 殘留 (☞ 4 前往步驟4)

環狀部分 (銀色) 未殘留 (☞ 6 前往步驟6)



4 以槌子敲擊主機上部的環狀部分

為確保安全，請穿戴工作手套。


將主機裝入塑膠袋，並以槌子敲擊直到環狀部分裂開。

- 若未將主機裝入塑膠袋，則可能因碎片飛濺而造成受傷。




5 以鉗子取下裂開的環狀部分

環狀部分取下後，可看見內部機殼的上部。

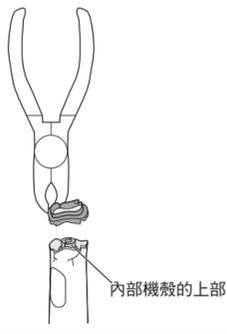

6 推出內部機殼


以鉗子前端抵住主機上部的中央突起部，將內部機殼從主機下部推出。

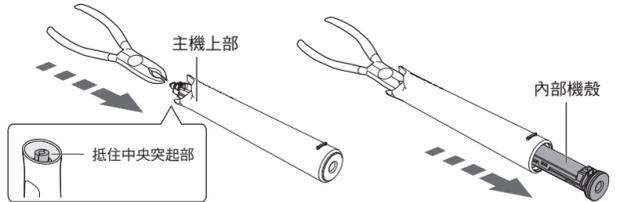

7 拆下充電電池蓋


以工具 (一字起子等) 的前端勾住充電電池蓋，拆下充電電池蓋。

- 請充分小心不要被工具的前端劃傷。

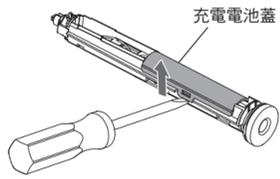

8 剪斷充電電池兩側的金屬零件

使用前端較細的剪刀，將金屬零件剪斷。

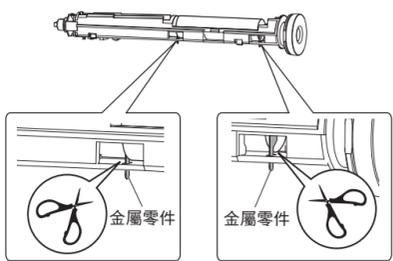

- 若金屬零件不易剪斷，請使用前端較細的刀具。

9 拆下充電電池

丟棄時的注意事項

- 為了防止短路，請將透明膠帶或貼紙等物黏貼在拆下的充電電池的 ⊕ ⊖ 端子。
- 請充分小心勿使充電電池漏液，並避免發熱導致燙傷。
- 請充分小心不要被零件的邊緣等割傷。

產品相關諮詢、維修諮詢 台灣歐姆龍健康客服中心 免付費諮詢專線：0809-080-880 客服信箱：oht-service@omron.com 服務時間：週一~週五 09:00-12:00、13:00-17:00 (例假日休息) ※歐姆龍將視情況變更休息或受理時間，請參考官網公告
--

若有問題，或欲購買其他產品及消耗品，請來電洽詢歐姆龍客服中心

委製廠：OMRON HEALTHCARE CO., LTD.
進口商名稱：台灣歐姆龍健康事業股份有限公司
進口商地址：台北市復興北路367號9樓

Made in China 廢電池請回收

