

Instruction Manual 2

OMRON

Automatic Blood Pressure Monitor Model HEM-7157T





Intellisense

All for Healthcare


Read instruction manual ① and ② before use.

- TH 使用前請閱讀使用說明書 ① 和 ②。
 - KO 사용하기 전에 사용 설명서 ① 과 ② 를 읽어 주세요.
 - MY အသုံးမပြုမီမှီ ၁၀ မိနစ် ၃၀
 - HI 30 मिनट पहले
 - TH 30 นาทีก่อนการวัด
 - ID 30 menit sebelum
 - VI 30 phút trước khi đo
 - MS 30 minit sebelum
- TH 5 minutes before: Relax and rest.
- ZH-TW 測量前 5 分鐘：放鬆和休息。
- KO 측정 5 분 전 : 안정된 상태를 취합니다.
- MY အသုံးမပြုမီ 5 မိနစ် စိတ်အေးအေးထားကာ အနားယူပါ။
- HI 5 मिनट पहले: निश्चित रहें और आराम करें।
- TH 5 минут перед измерением: Расслабьтесь и отдохните.
- ID 5 menit sebelum: Rileks dan istirahat.
- VI 5 phút trước khi đo: Thư giãn và nghỉ ngơi.
- MS 5 minit sebelum: Bertenang dan rehat.


- 1 Package Contents
- ZH-TW 包裝內容物
- KO 구성품
- MY ထုတ်ပို့မှုအကြောင်းအရာများ
- HI पैकेज में सामग्री
- TH อุปกรณ์ให้เข้ามาในกล่อง
- ID Isi Kemasan
- VI Các chi tiết trong bao bì
- MS Kandungan Bungkus

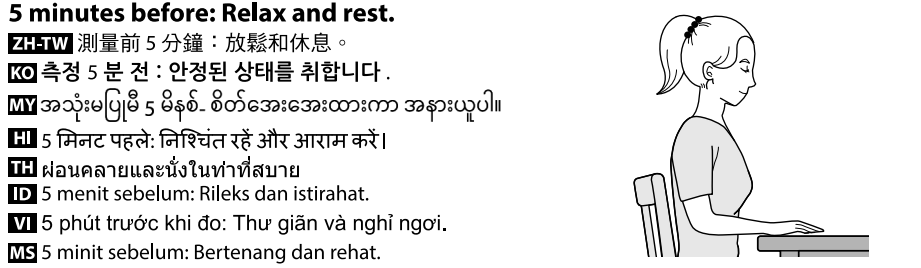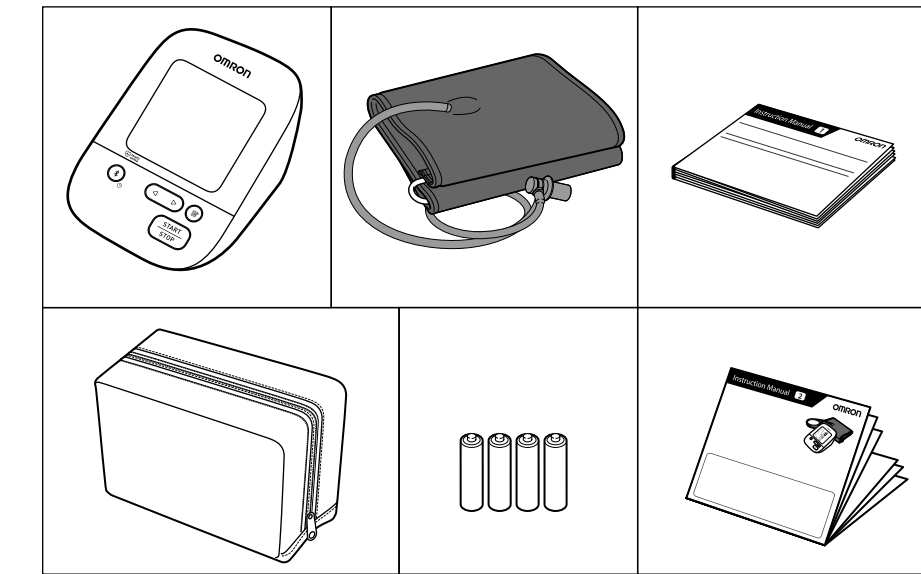


- 3 Downloading the "OMRON connect" App
- ZH-TW 下載「OMRON connect」應用程式
- KO "OMRON connect" 앱 다운로드
- MY "OMRON connect" အက်ပ်လ်ဒေါင်းလုဒ်ခွင့်
- HI "OMRON connect" ऐप को डाउनलोड करना
- TH ดาวน์โหลดแอป "OMRON connect"
- ID Mengunduh Aplikasi "OMRON connect"
- VI Đang tải xuống ứng dụng "OMRON connect"
- MS Memuat turun Aplikasi "OMRON connect"

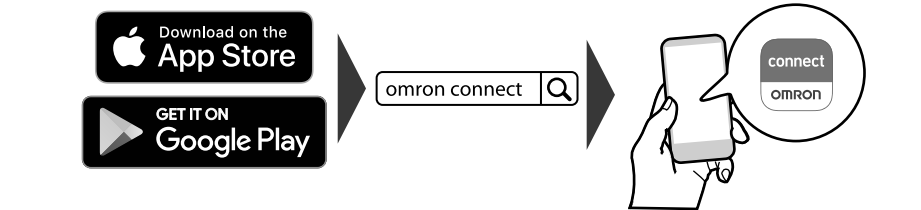

- 4 Installing Batteries
- ZH-TW 安裝電池
- KO 건전지 삽입
- MY ဘက်ထရီများ တပ်ဆင်ခြင်း
- HI बैटरी इंस्टॉल करना
- TH การใส่แบตเตอรี่
- ID Memasang Baterai
- VI Lắp pin
- MS Memasang Bateri

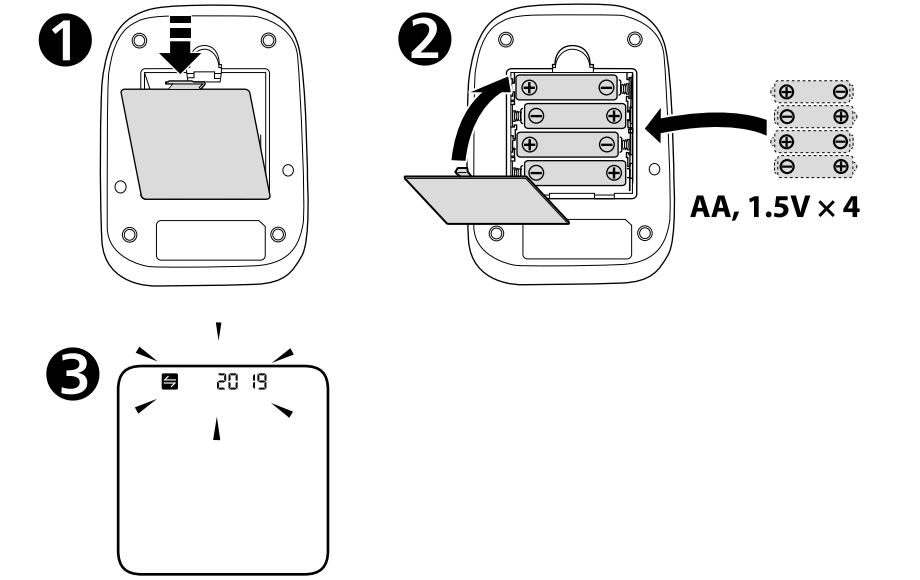

- 5 Pairing Your Smart Device
- ZH-TW 與您的智慧裝置配對
- KO 스마트폰과 연동 (페어링)
- MY သင်၏စမတ်ဖုန်းနှင့် တွဲဖက်ခြင်း
- HI स्मार्ट डिवाइस पेयर करना
- TH จับคู่อุปกรณ์สมาร์ทไวซ์
- ID Memasang Perangkat Cerdas Anda
- VI Kết nối thiết bị thông minh của bạn
- MS Memastikan Peranti Pintar Anda Berpasangan

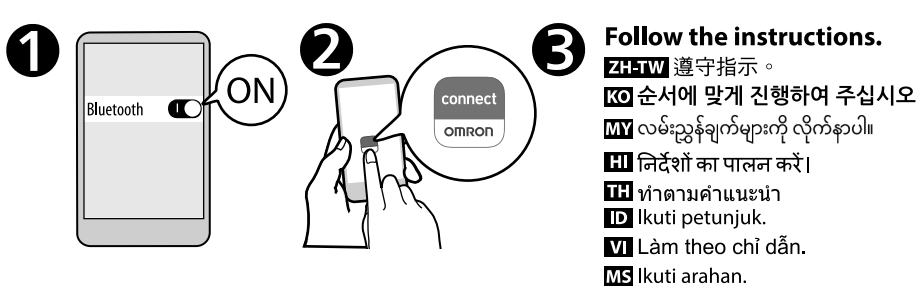

The date and time will automatically be set when your monitor is paired with the app.

ZH-TW 若血壓計與應用程式配對，將自動設定日期與時間。

KO 연동 (페어링) 되면 날짜와 시간은 자동으로 설정됩니다.

MY သင်၏စမတ်ဖုန်းအား အက်ပ်လ်ဒေါင်းလုဒ်ခွင့်နှင့်အချိန်မှာ အလိုအလျောက် သတ်မှတ်ပြုပြန်သွားပါမည်။

HI मॉनीटर को ऐप के साथ पेयर किए जाने पर तिथि और समय स्वचालित ढंग से सेट हो जाएगा।

TH วันที่และเวลาจะถูกรับค่าโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องวัดของคุณจับคู่กับแอป

ID Tanggal dan waktu secara otomatis akan diatur saat monitor dipasang dengan aplikasi.

VI Ngày và giờ sẽ tự động được cài đặt khi máy đo huyết áp được kết nối với ứng dụng.

MS Tarikh dan masa akan ditetapkan secara automatik apabila pemantau anda berpasangan dengan aplikasi ini.

- 6 Setting Date and Time Manually
- ZH-TW 手動設定日期與時間
- KO 날짜와 시간 수동 설정
- MY နေ့နှင့်အချိန်အား မန်နူယ်သတ်မှတ်ခြင်း
- HI तिथि और समय मैनुअल रूप से सेट करना
- TH การตั้งค่าวันที่และเวลาด้วยตนเอง
- ID Mengatur Tanggal dan Waktu secara Manual
- VI Thiết lập ngày và giờ thủ công
- MS Menetapkan Tarikh dan Masa Secara Manual

If your monitor is paired with your smart device, date and time is set automatically. When you need to set them manually, set year > month > day > hour > minute.

ZH-TW 若血壓計與您的智慧裝置配對，將自動設定日期與時間。若您需要手動設定它們，請設定年 > 月 > 日 > 小時 > 分鐘。

KO 스마트폰과 연동 (페어링) 되면 날짜와 시간이 자동으로 설정됩니다. 수동으로 설정하는 경우에는 년 > 월 > 일 > 시간 > 분 순으로 설정합니다.

MY မော်နီတာအား သင်၏စမတ်ဖုန်းနှင့် တွဲဖက်လိုက်ပါက၊ နေ့နှင့်အချိန်မှာ အလိုအလျောက် သတ်မှတ်ပြုပြန်သွားပါမည်။ ၎င်းတို့အား မန်နူယ်သတ်မှတ်ရန်လိုအပ်သည့်အခါ နှစ် > လ > ရက် > နာရီ > မိနစ် ကို သတ်မှတ်ပါ။


HI यदि आपका मॉनीटर आपके स्मार्ट डिवाइस के साथ पेयर किया जाता है, तो तिथि और समय स्वचालित ढंग से सेट हो जाता है। जब आपको उन्हें मैनुअल ढंग से सेट करने की आवश्यकता हो, तो वर्ष > महीना > दिन > घंटे > मिनट सेट करें।

TH หากเครื่องวัดของคุณจับคู่กับอุปกรณ์สมาร์ทไวซ์ของคุณ วันที่และเวลาจะถูกรับค่าโดยอัตโนมัติ หากจำเป็นต้องตั้งค่าวันที่และเวลาด้วยตนเอง ตั้งค่าปี > เดือน > วันที่ > ชั่วโมง > นาที

ID Jika monitor Anda dipasangkan dengan perangkat cerdas, tanggal dan waktu akan diatur secara otomatis. Saat Anda perlu mengaturnya secara manual, atur tahun > bulan > hari > jam > menit.

VI Nếu máy đo huyết áp được kết nối với thiết bị thông minh, ngày và giờ sẽ được cài đặt tự động. Khi bạn cần cài đặt thủ công, hãy cài đặt năm > tháng > ngày > giờ > phút.

MS Jika pemantau anda berpasangan dengan peranti pintar anda, tarikh dan masa ditetapkan secara automatik. Apabila anda perlu menentukannya secara manual, tetapkan tahun > bulan > hari > jam > minit.

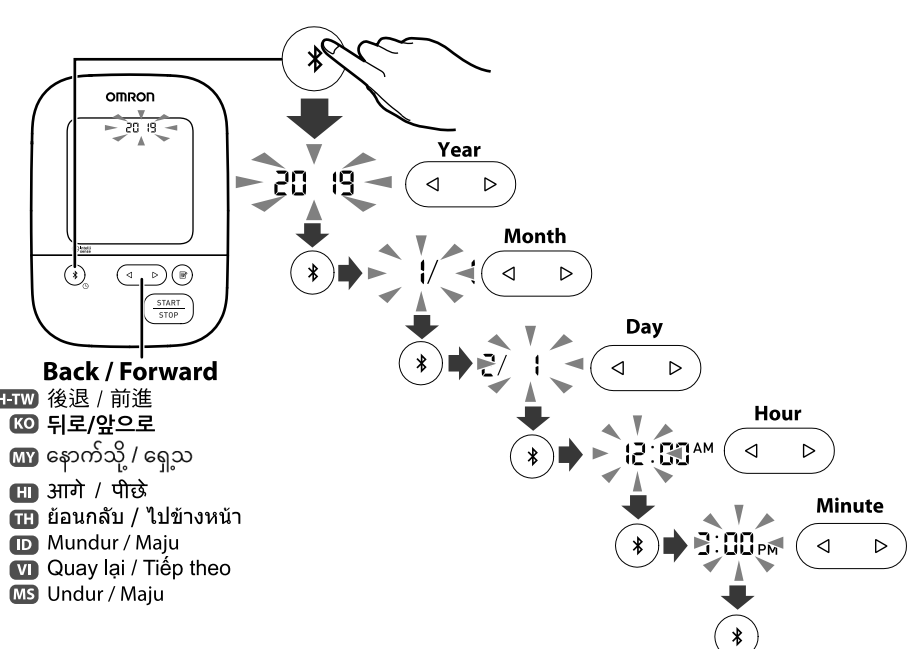

If taking measurements on the right arm, refer to:

ZH-TW 如果在右臂上進行測量，請參閱使用說明書 ① 之 2.3。

KO 오른쪽 측정할 경우, 사용설명서 ① 의 2.3 을 참조해 주세요.

MY ဘက်သတ်လက်မောင်းတွင် တိုင်းတာမှုပြုလုပ်ပါက၊ မော်နီတာအား ကိုက်ညီပါ။

HI दाईं भुजा पर मापन करते समय, पृष्ठ 2.3


TH หากทำการวัดที่แขนข้างขวา โปรดดูที่: ① 2.3

ID Jika melakukan pengukuran di lengan kanan, lihat: ① 2.3

VI Nếu tiến hành đo trên cánh tay phải, hãy tham khảo: ① 2.3

MS Jika mengambil ukuran pada lengan kanan, rujuk: ① 2.3

- 7 Applying the Cuff on the Left Arm
- ZH-TW 在左臂上捲繞壓脈帶
- KO 왼팔에 커프 감기
- MY ဘယ်ဘက်လက်မောင်းတွင် လက်ပတ်ကိုပတ်ခြင်း
- HI बाईं भुजा पर कफ लगाना
- TH การใช้ผ้าพันแขนกับแขนข้างซ้าย
- ID Duduk dengan Benar
- VI Ngồi đúng tư thế
- MS Memakai Kaf pada Lengan Kiri

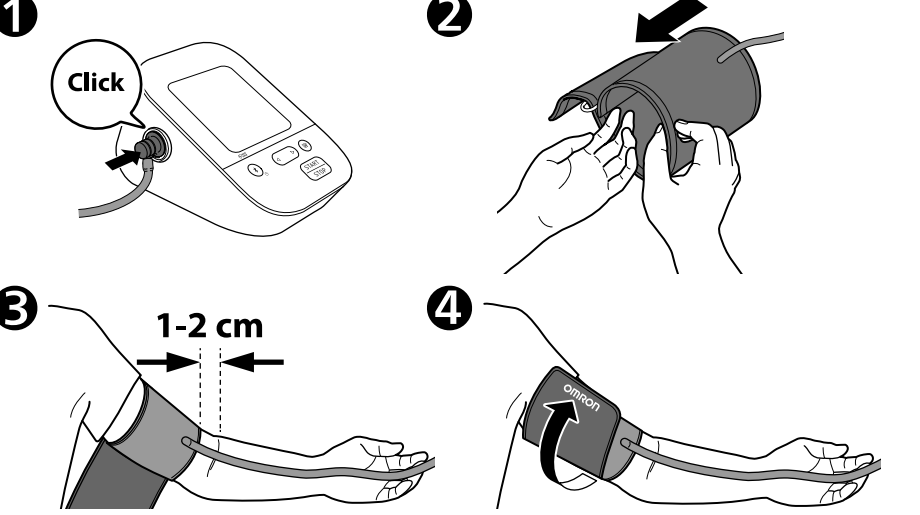

③ Tube side of the cuff should be 1 - 2 cm above the inside elbow.

ZH-TW 壓脈帶的空氣管一側應在肘部內側上方 1 ~ 2 公分處。

KO 팔꿈치 안 쪽의 접히는 부분에서 1-2 cm 간격을 두고 감아주세요.

MY လက်ပတ်၏ပြွန်ဘက်ခြမ်းသည် အတွင်းဘက်တံတောင်ဆစ်၏အထက် 1-2 cm တွင် ရှိသင့်ပါသည်။

HI कफ का ट्यूब वाला हिस्सा कोहनी के भीतरी हिस्से से 1-2 cm ऊपर होना चाहिए।

TH ด้านสายยางของผ้าพันแขนควรอยู่สูงกว่าด้านในข้อศอก 1 - 2 ซม.

ID Sisi tabung manset harus berada 1 - 2 cm di atas siku bagian dalam.

VI Ống dẫn khi trên vòng bít phải cao hơn mặt trong khuỷu tay 1 - 2 cm.

MS Bahagian tiub kaf hendaklah 1 - 2 cm di atas bahagian dalam siku.

④ Make sure that air tube is on the inside of your arm and wrap the cuff securely so it can no longer slip round.

ZH-TW 確保空氣管位於手臂內側並牢固地包攬壓脈帶，使其不再滑動。

KO 에어튜브는 팔 안쪽의 중앙에 위치시키며 단단히 고정합니다.

MY လေပြွန်မှာ သင်လက်မောင်းအတွင်းဘက်ပေါ်တွင်ရှိနေကြောင်း သေချာအောင်လုပ်ကာ ချော့ထွက်သွားခြင်းမရှိစေရန် လက်ပတ်ကို သေချာတွပ်ပါ။

HI सुनिश्चित करें कि एयर ट्यूब आपकी बांह के भीतरी हिस्से की तरफ है और कफ को मजबूती से लपेट ले ताकि यह फिसल कर दूसरी तरफ नहीं जा सके।

TH ตรวจสอบให้แน่ใจว่า สายยางอยู่บนแขนด้านในและพันผ้าพันแขนให้แน่นโดยไม่สามารถหลุดรอบแขนได้

ID Pastikan selang udara berada di bagian dalam lengan, lalu bungkuskan manset dengan aman agar tidak bergerak.

VI Đảm bảo rằng ống khí ở mặt trong cánh tay của bạn và quần chặt vòng bít để không bị trượt ra.

MS Pastikan tiub udara di sebelah dalam lengan anda dan balut kaf dengan ketat supaya ia tidak lagi bergerak.

If taking measurements on the right arm, refer to:

ZH-TW 如果在右臂上進行測量，請參閱使用說明書 ① 之 2.3。

KO 오른쪽 측정할 경우, 사용설명서 ① 의 2.3 을 참조해 주세요.

MY ဘက်သတ်လက်မောင်းတွင် တိုင်းတာမှုပြုလုပ်ပါက၊ မော်နီတာအား ကိုက်ညီပါ။

HI दाईं भुजा पर मापन करते समय, पृष्ठ 2.3


TH หากทำการวัดที่แขนข้างขวา โปรดดูที่: ① 2.3

ID Jika melakukan pengukuran di lengan kanan, lihat: ① 2.3

VI Nếu tiến hành đo trên cánh tay phải, hãy tham khảo: ① 2.3

MS Jika mengambil ukuran pada lengan kanan, rujuk: ① 2.3

- 8 Sitting Correctly
- ZH-TW 正確坐姿
- KO 올바른 자세 확인
- MY မှန်ကန်စွာ ထိုင်ခြင်း
- HI सही तरीके से बैठना
- TH การนั่งในท่าที่ถูกต้อง
- ID Duduk dengan Benar
- VI Ngồi đúng tư thế
- MS Meletak dengan Betul

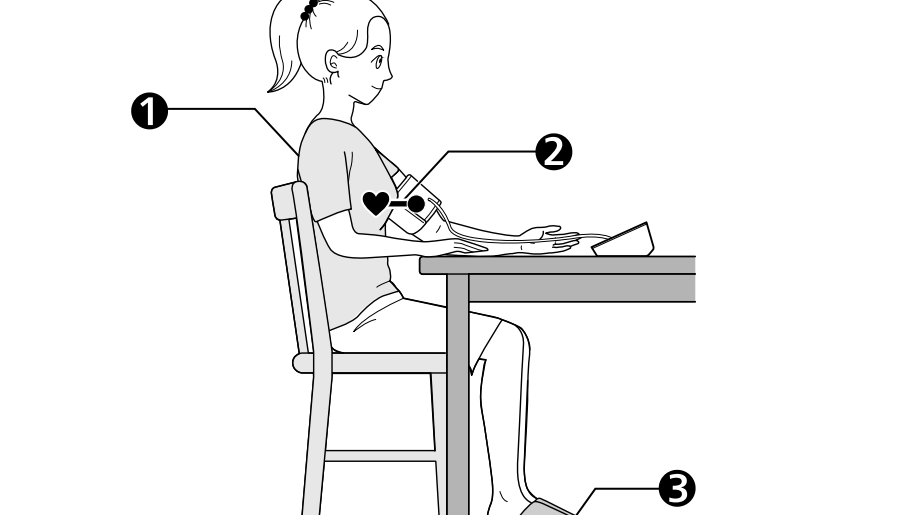

① Sit comfortably with your back and arm supported.

ZH-TW 舒適地坐著，並讓背部和手臂有穩定支撐。

KO 등과 팔이 지지된 자세로 편하게 앉으십시오.

MY နောက်ကျောနှင့် လက်မောင်းကို ထောက်ထားပြီး သက်တောင့်သက်သာစွာ ထိုင်ပါ။

HI अपना पीठ और बांह को सहारा देते हुए आराम से बैठें।

TH นั่งให้สบายโดยมีพนักพิงและที่วางแขน

ID Duduklah dengan punggung dan lengan disangga.

VI Ngồi thoải mái với lưng và cánh tay của bạn được đỡ.

MS Duduk dengan selesa dengan belakang dan lengan anda disokong.

② Place the arm cuff at the same level as your heart.

ZH-TW 將手臂壓脈帶放在與心臟同高的位置。

KO 커프는 심장과 같은 높이에 위치하도록 합니다.

MY လက်မောင်းပတ်သည့်လက်ပတ်ကို သင့်နှလုံးနှင့် အမြင့်အတူထားရန်ပါ။

HI आर्म कफ को अपने हृदय के स्तर पर रखें।

TH วางผ้าพันแขนให้ระดับเดียวกับหัวใจของคุณ

ID Letakkan manset lengan dengan posisi yang sama sesuai level jantung Anda.

VI Đặt vòng bít bấp tay ngang tim.

MS Letakkan kaf lengan pada paras yang sama dengan jantung anda.

③ Keep feet flat, legs uncrossed, remain still and do not talk.

ZH-TW 雙腳平放，不要交叉雙腿，保持靜止，不要說話。

KO 다리를 꼬지 않은 상태로 양발은 바닥에 대고, 움직이거나 말을 하지 않습니다.

MY မြေပေါ်မှထောက်ကာ မြေထောက်ချိတ်ထားခြင်းမရှိဘဲထိုင်ကာ ခြုံငုံနေခြင်း စတာမပြောပါနှင့်။

HI पैर सपाट रखें, पैर मुड़े न हों, स्थिर रहें और बात नहीं करें।


TH วางเท้าราบกับพื้น ไม่ไขว้ขนาบ นั่งนิ่ง และห้ามพูด

ID Jaga agar telapak kaki rata, jangan silangkan kaki, tetap diam, dan jangan berbicara.

VI Giữ bàn chân phẳng, chân không bắt chéo, không cử động và không nói chuyện.

MS Pastikan kaki anda rata, kaki disilangkan, jangan bergerak dan jangan bercakap.

- 9 Taking a Measurement
- ZH-TW 測量
- KO 측정하기
- MY တိုင်းတာမှု ပြုလုပ်ခြင်း
- HI माप लेना
- TH การทำการวัด
- ID Melakukan Pengukuran
- VI Tiến hành đo
- MS Mengambil Ukuran

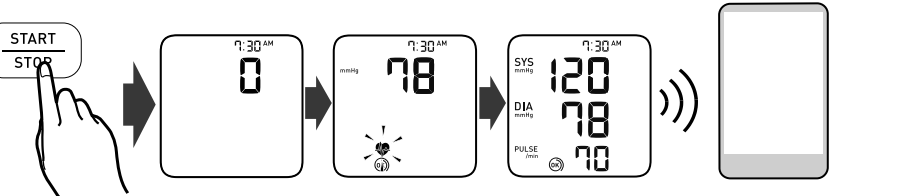

When the [START/STOP] button is pressed, the measurement is taken and saved automatically. Open the app to transfer the reading.

- ZH-TW 按下 [START/STOP] (開始 / 停止) 鍵時，將自動進行測量並儲存。打開應用程式以傳輸數值。
- KO [START/STOP] (시작 / 정지) 버튼을 누르면 측정이 이루어지고 자동으로 저장됩니다. 앱을 열어서 측정값을 전송합니다.
- MY [START/STOP] (စတင်ရန်/ရပ်တန့်ရန်) ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်သည့်အခါ၊ တိုင်းတာမှုကို အလိုအလျောက်လုပ်ဆောင်ပြီး သိမ်းဆည်းမည်ဖြစ်ပါသည်။ ဖော်ရွှေမှုကိုလွှဲပြောင်းရန် အက်ပ်လ်ဒေါင်းလုဒ်ပါ။
- HI [START/STOP] (शुरू/रुक) बटन को दबाने पर मापन स्वचालित ढंग से लेकर सहेज दिया जाता है। रीडिंग को स्थानांतरित करने के लिए ऐप खोलें।
- TH เมื่อคุณกด [START/STOP] (เริ่ม/หยุด) การวัดค่าจะเริ่มต้นและค่าจะถูกบันทึกโดยอัตโนมัติ เปิดแอปเพื่อโอนข้อมูลค่าที่วัดได้
- ID Saat tombol [START/STOP] (mulai/berhenti) ditekan, pengukuran diambil dan disimpan secara otomatis. Buka aplikasi untuk mentransfer pembacaan.
- VI Khi nhấn nút [START/STOP] (Khởi động/dừng lại), quá trình đo được thực hiện và lưu lại kết quả tự động. Mở ứng dụng để truyền kết quả đo.
- MS Apabila butang [START/STOP] (Mula / berhenti) ditekan, ukuran diambil dan disimpan secara automatik. Buka aplikasi untuk memindahkan bacaan.

If your systolic pressure is more than 210 mmHg:

After the arm cuff starts to inflate, press and hold the [START/STOP] button until the monitor inflates 30 to 40 mmHg higher than your expected systolic pressure.

ZH-TW 如果您的收縮壓超過 210 mmHg：手臂壓脈帶開始加壓後，按住 [START/STOP] (開始 / 停止) 鍵，直到血壓計加壓使壓力比預期收縮壓高 30 ~ 40 mmHg。

KO如果您的收缩压超过 210 mmHg：手臂压脉带开始加压后，按住 [START/STOP] (开始 / 停止) 键，直到血压计加压使压力比预期收缩压高 30 ~ 40 mmHg。

MY ချော့ထွက်သည့် 210 mmHg ထက် ပိုမိုမြင့်မည်။ လက်မောင်းတွင်လုပ်သည့်လက်တံတောင်ဆစ်ထက် လေးလေးပြီအောင် သင်၏စမတ်ဖုန်းသို့ ထုတ်ပို့လိုက်ပါ။

HI यदि आपका सिस्टोलिक दाब 210 mmHg से अधिक है: जब आर्म कफ भरना शुरू हो जाए, [START/STOP] (शुरू/रुक) बटन को दबाएं और तब तक दबाकर रखें जब तक मॉनीटर आपके अपेक्षित सिस्टोलिक दाब से 30 से 40 mmHg अधिक भर नहीं जाता।

TH หากความดันโลหิตส่วนบนของคุณสูงกว่า 210 mmHg: หลังจากผ้าพันแขนเริ่มพองตัว กดปุ่ม [START/STOP] (เริ่ม/หยุด) ค้างไว้จนกว่าเครื่องวัดจะปล่อยลมเข้าสูงกว่าความดันโลหิตส่วนบนของคุณที่คาดไว้ 30 ถึง 40 mmHg

ID Jika tekanan sistolik Anda lebih dari 210 mmHg: Setelah manset lengan mulai mengembang, tekan dan tahan tombol [START/STOP] (mulai/berhenti) hingga monitor mengembang 30 hingga 40 mmHg lebih tinggi dari tekanan sistolik yang diharapkan.

VI Nếu huyết áp tâm thu của bạn cao hơn 210 mmHg: Sau khi vòng bít bắt đầu phồng lên, nhấn và giữ nút [START/STOP] (Khởi động/dừng lại) cho đến khi vòng bít phồng lên cao hơn từ 30 - 40 mmHg so với huyết áp tâm thu dự định của bạn.

MS Jika tekanan sistolik anda lebih dari 210 mmHg: Selepas kaf lengan mula mengembang, tekan dan tahan butang [START/STOP] (Mula / berhenti) sehingga pemantau mengembang 30 hingga 40 mmHg lebih tinggi daripada tekanan sistolik yang anda jangka.

9 Taking a Measurement	
ZH-TW 測量	TH การทำการวัด
KO 측정하기	ID Melakukan Pengukuran
MY တိုင်းတာမှု ပြုလုပ်ခြင်း	VI Tiến hành đo
HI माप लेना	MS Mengambil Ukuran

Taking a measurement in guest mode

ZH-TW 在訪客模式中取得測量值
KO 게스트 모드에서 측정
MY ဧည့်သည်မှတ်တွင် တိုင်းတာမှုပြုလုပ်ခြင်း
HI गेस्ट मोड में एक मापन लेना
TH การวัดในโหมดผู้มาเยือน
ID Melakukan pengukuran dalam mode tamu
VI Đo ở chế độ khách
MS Mengambil ukuran dalam mod tetamu

The guest mode can be used to take a single measurement for another user. No readings are stored in the memory.

ZH-TW 可使用訪客模式，為另一個使用者測量一次血壓。不會將任何數值儲存到記憶體。
KO 게스트 모드는 다른 사용자가 만회 측정을 할 때 사용할 수 있습니다. 메모리에 측정값이 저장되지 않습니다.


MY အခြား အသုံးပြုသူအတွက် တိုင်းတာမှု ပြုလုပ်ရန် ဧည့်သည်မှတ်ကို အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဖတ်ပြသူများကို မှတ်ဉ်တွင် မှတ်ဉ်မသွင်းပါ။

HI गेस्ट मोड का उपयोग किसी अन्य उपयोगकर्ता के लिए एकल माप लेने के लिए किया जा सकता है। कोई भी रीडिंग मेमोरी में संग्रहीत नहीं की जाती है।

TH โหมดผู้มาเยือนใช้สำหรับวัดค่าให้ผู้ใช้งานอื่นเพียงครั้งเดียว ค่าที่อ่านได้จะไม่จัดเก็บเอาไว้ในหน่วยความจำ
ID Mode tamu dapat digunakan untuk melakukan satu pengukuran bagi pengguna lain. Tidak ada hasil pengukuran yang disimpan dalam memori.


VI Có thể dùng chế độ khách để đo một lần cho một người khác. Không có chỉ số đọc nào được lưu trữ trong bộ nhớ.

MS Mod tetamu boleh digunakan untuk mengambil satu ukuran untuk penggunalain. Tiada bacaan disimpan dalam memori.

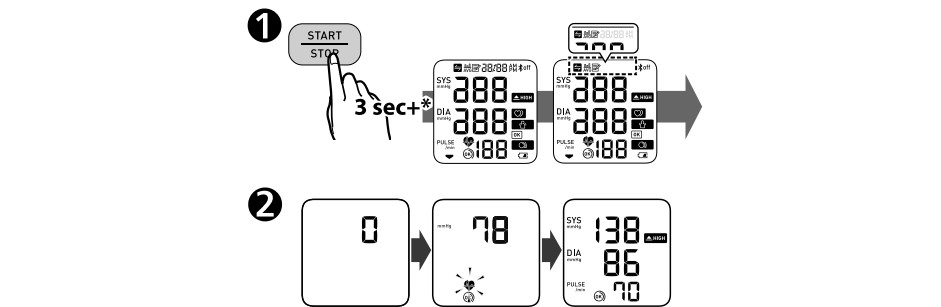

* sec+: press the button at least the specified number of seconds. / 按壓住按鈕的時間需達到指定秒數。 / 최소 몇 초 동안 버튼을 누릅니다. / အနည်းဆုံး သတ်မှတ် ထူရှည်ချိတ်သည့်အထိ လေ့လိုက်နိုင့်ပါ။ / कम से कम निदिष्ट सेकंड के लिए बटन दबाएं / กดปุ่มค้างไว้ตามเวลาที่ระบุเป็นหน่วยย่อย / tekan tombol sedikitnya selama waktu yang ditentukan dalam detik. / nhấn nút trong thời gian ít nhất bằng số giây được chỉ định. / tekan butang sekurang-kurangnya bilangan detik yang ditentukan.

10 Checking Readings	
ZH-TW 檢查數值	TH การตรวจสอมค่าที่วัดได้
KO 측정값 확인	ID Memeriksa Pembacaan
MY ဖတ်ရှုမှုများကို စစ်ဆေးခြင်း	VI Kiểm tra kết quả đo
HI रीडिंग की जांच करना	MS Memeriksa Bacaan

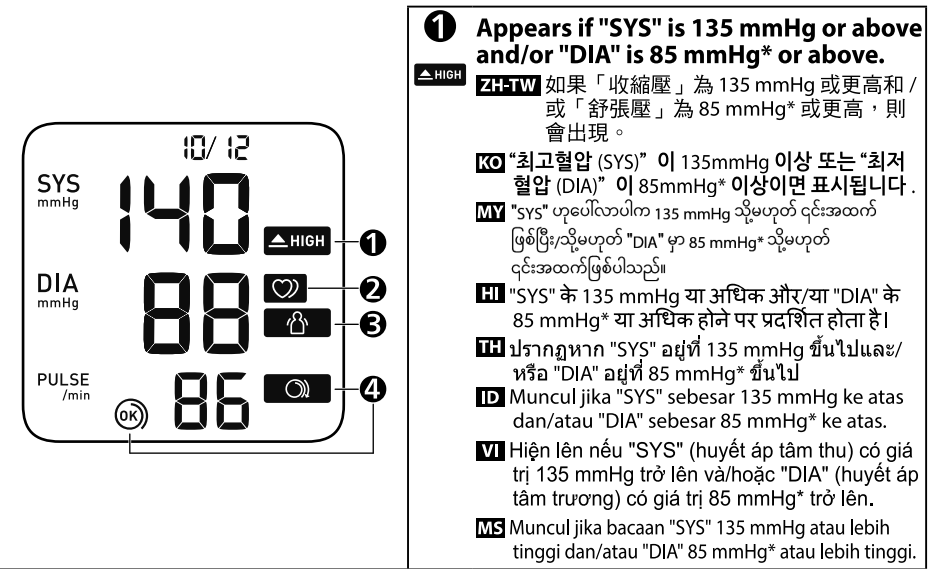

1 Appears if "SYS" is 135 mmHg or above and/or "DIA" is 85 mmHg* or above.
ZH-TW 如果「收縮壓」為 135 mmHg 或更高和 / 或「舒張壓」為 85 mmHg* 或更高，則會出現。
KO "최고혈압 (SYS)" 이 135mmHg 이상 또는 "최저혈압 (DIA)" 이 85mmHg* 이상이면 표시됩니다.
MY "SYS" ကုမ္ပဏီလောက 135 mmHg သို့မဟုတ် ၎င်းအထက် ဖြစ်နေပါသည်။
HI "SYS" के 135 mmHg या अधिक और/या "DIA" के 85 mmHg* या अधिक होने पर प्रदर्शित होता है।
TH ปารากฎหาก "SYS" อยู่ที่ 135 mmHg ขึ้นไปและ/หรือ "DIA" อยู่ที่ 85 mmHg* ขึ้นไป
ID Muncul jika "SYS" sebesar 135 mmHg ke atas dan/atau "DIA" sebesar 85 mmHg* ke atas.
VI Hiện lên nếu "SYS" (huyết áp tâm thu) có giá trị 135 mmHg trở lên và/hoặc "DIA" (huyết áp tâm trương) có giá trị 85 mmHg* trở lên.
MS Muncul jika bacaan "SYS" 135 mmHg atau lebih tinggi dan/atau "DIA" 85 mmHg* atau lebih tinggi.

2 Appears when an irregular rhythm is detected during a measurement. If it appears repeatedly, OMRON recommends to consult your physician.**
ZH-TW 測量期間偵測到不規則脈波 ** 時出現。如果反覆出現，OMRON 建議諮詢您的醫師。
KO 측정 중에 불규칙 맥파 ** 가 감지되는 경우에 표시됩니다. 빈번하게 표시되는 경우에는 의사와 상담하는 것을 권장합니다.
MY တိုင်းတာနေစဉ်အတွင်း ပုံမှန်မဟုတ်သည့်စဉ်ချက်**ကို ထောက်လှမ်းမိသည့်အခါ ပေါ်လာပါသည်။ ၎င်း ထပ်ကာထပ်ကာပေါ်လာပါက သင့်၏သမားတော်နှင့်ဆွေးနွေးရန် OMRON မှ အကြံပြုပါသည်။
HI एक मापन के दौरान एक अनियमित लय** की पहचान होने पर प्रदर्शित होता है। यदि यह बार-बार प्रदर्शित होता है, तब OMRON आपको अपने चिकित्सक से परामर्श करने की सलाह देता है।
TH สัญลักษณะปรากฏเมื่อตรวจจับได้ว่า จังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ** ขณะทำการวัด หากปรากฏ ถูกลักษณะนี้ซ้ำบ่อยครั้ง OMRON แนะนำให้ปรึกษาแพทย์
ID Muncul saat irama tak beraturan** terdeteksi selama pengukuran. Jika muncul secara berulang, OMRON menyarankan Anda untuk berkonsultasi dengan dokter.
VI Hiện lên khi phát hiện nhịp không đều** trong quá trình đo. Nếu biểu tượng hiện lên nhiều lần, OMRON khuyên bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ của mình.
MS Muncul apabila rentak tidak sekata** dikesan semasa membuat ukuran. Jika muncul secara berulang, OMRON mengesyorkan supaya anda merujuk pada doktor anda.

3 Appears when your body moves during a measurement. Remove the arm cuff, wait 2-3 minutes and try again.
ZH-TW 測量過程中身體移動時出現。取下手臂壓脈帶，等待 2 ~ 3 分鐘再試一次。
KO 측정 중에 몸을 움직인 경우에 표시됩니다. 커프를 팔에서 분리하고 2~3 분 후에 다시 측정하여 주세요.
MY တိုင်းတာနေစဉ်အတွင်း သင့်ရွှေးကိုယ် လှုပ်ရှားသည့်အခါ ပေါ်လာပါသည်။ လက်မောင်းတွင်ပတ်သည့်လက်ပတ်ကိုဖယ်ရှားကာ 2-3 မိနစ်စောင့်ပြီး ထပ်မံဖြိုစားပါ။
HI मापन के दौरान आपके शरीर के हिलने पर प्रदर्शित होता है। आर्म कफ निकालें, 2-3 मिनट तक प्रतीक्षा करें और दोबारा कोशिश करें।
TH ปารากฎเมื่อคุณขยับร่างกายขณะทำการวัด ถอดผ้าพันแขนออก รอ 2-3 นาทีแล้วลองอีกครั้ง
ID Muncul saat tubuh Anda bergerak saat pengukuran. Lepas manset lengan, tunggu 2-3 menit lalu coba lagi.
VI Hiện lên khi cơ thể bạn di chuyển trong quá trình đo. Tháo vòng bít, đợi 2-3 phút và thử lại.
MS Muncul apabila badan anda bergerak semasa membuat ukuran. Tanggalkan kaf lengan, tunggu 2-3 minit dan cuba lagi.


4 Cuff is tight enough.
ZH-TW 壓脈帶有綁緊。
KO 커프를 올바른 세기로 착용한 경우에 표시
MY လက်ပတ်မှာ လုံလောက်အောင်တင်းကြပ်နေပြီဖြစ်ပါသည်။
HI कफ पर्याप्त रूप से कसी है।
TH ผ้าพันแขนแน่นพอดี
ID Manset cukup kencang.
VI Vòng bít đủ chặt.
MS Kaf tidak cukup ketat.

***The high blood pressure definition is based on the 2018 ESH/ESC Guidelines.**
ZH-TW * 高血壓定義基於 2018 ESH/ESC 指引。
KO * 고혈압의 정의는 2018 ESH/ESC 지침을 토대로 합니다.
MY * သွေးဖိအားမြင့်ခြင်းအစီရင်ခံစာတွင်မှတ်ချက်မှာ 2018 ESH/ESC လမ်းညွှန်ချက်များပေါ်တွင် အခြေခံပါသည်။
HI * उच्च रक्त चाप की परिभाषा 2018 ESH/ESC के दिशा-निर्देशों पर आधारित है।
TH * คำจำกัดความความดันโลหิตสูงยึดตามแนวทางการรักษาภาวะความดันโลหิตสูง ESH/ESC 2018
ID * Definisi tekanan darah tinggi didasarkan pada Pedoman 2018 ESH/ESC.
VI * Định nghĩa về huyết áp cao dựa trên Hướng dẫn về ESH/ESC 2018.
MS * Definisi Tekanan darah tinggi adalah berdasarkan Garis Panduan 2018 ESH/ESC.

****An irregular heart beat rhythm is defined as a rhythm that is 25 % less or 25 % more than the average rhythm detected during a measurement.**
ZH-TW ** 不規則脈波的定義是，測量期間偵測到低於或高於平均數值 25% 的脈搏。
KO ** 불규칙 맥파는 혈압을 측정하는 동안 감지되는 평균 맥파보다 25% 미만이거나 25% 를 초과하는 맥파로 정의됩니다.
MY ** ပုံမှန်မဟုတ်သည့်နှလုံးခုန်နှုန်းအား တိုင်းတာစဉ်အတွင်း သိရှိရသည့် ပျမ်းမျှနှုန်းထက် 25 % လျော့နည်းသို့မဟုတ် 25% ပိုနေသောနှုန်းနှုန်းအဖြစ် အစီရင်ခံစာတွင်ပါသည်။
HI ** हृदय धड़कने की अनियमित लय को एक मापन के दौरान पहचानी गई औसत लय से 25 % कम या 25 % अधिक के रूप में परिभाषित किया जाता है।
TH ** จังหวะการเต้นของหัวใจผิดปกติ หมายถึง จังหวะการเต้นที่ค่ากว่าค่าเฉลี่ย 25% หรือสูงกว่าค่าเฉลี่ย 25% ที่ตรวจจับได้ระหว่างการวัด
ID **Irama detak jantung tak beraturan didefinisikan sebagai irama yang 25% kurang dari atau 25% lebih dari irama rata-rata yang terdeteksi saat pengukuran.
VI **Nhịp tim đập bất thường được định nghĩa là nhịp ít hơn 25% hoặc lớn hơn 25% so với nhịp trung bình phát hiện thấy trong quá trình đo.
MS **Rentak jantung tidak sekata ditakrifkan sebagai rentak yang 25% kurang atau 25% lebih daripada rentak purata yang dikesan semasa ukuran.

Error messages or other problems? Refer to:
ZH-TW 錯誤訊息或其他問題？請參考使用說明書 (1) 之 3：
KO 에러 메시지가 다른 문제가 있는 경우에는 사용설명서 (1)의 3을 참조하여주세요.
MY အမှားအယွင်းမက်ဆေချ်များ သို့မဟုတ် အခြားပြဿနာများမှ ကိုးကားရန်။
HI त्रुटि संदेश या अन्य समस्याएं देखें:
TH สัญลักษณะและข้อความบนจอของผิดปกติพลาดหรือปัญหาอื่น โปรดดูที่:
ID Pesan kesalahan atau masalah lain? Lihat:
VI Thông báo lỗi hoặc vấn đề khác? Tham khảo:
MS Mesej ralat atau masalah lain? Rujuk pada:


11 Using Memory Functions	
ZH-TW 使用記憶功能	TH การใช้ฟังก์ชันหน่วยความจำ
KO 메모리 기능 사용	ID Menggunakan Fungsi Memori
MY မှတ်ဉ်ရိုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအသုံးပြုခြင်း	VI Sử dụng chức năng bộ nhớ
HI मेमोरी फंक्शन का उपयोग करना	MS Menggunakan Fungsi Memori

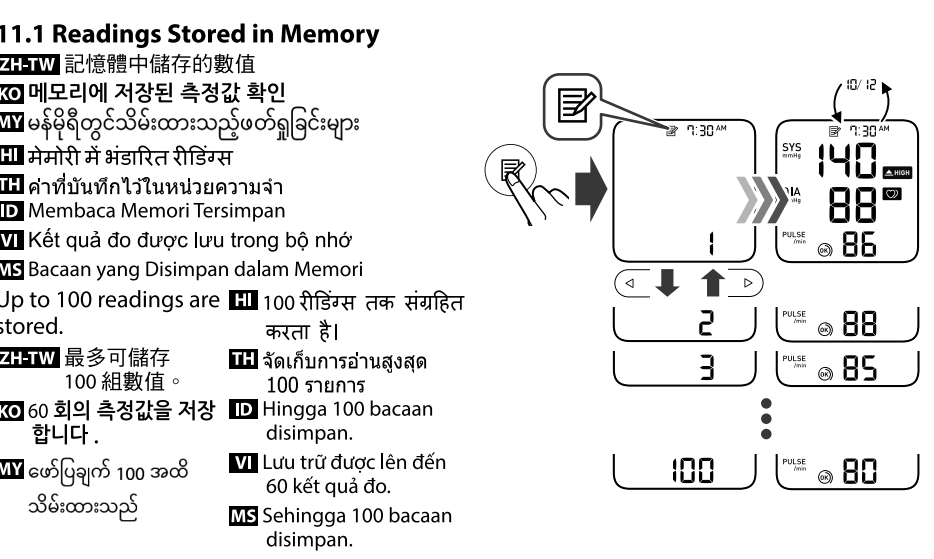

11.1 Readings Stored in Memory
ZH-TW 記憶體中儲存的數值
KO 메모리에 저장된 측정값 확인
MY မှတ်ဉ်ရိုလုပ်သိမ်းထားသည့်ဖတ်ရှုခြင်းများ
HI मेमोरी में संग्रहित रीडिंग्स
TH ค่าที่บันทึกไว้ในหน่วยความจำ
ID Membaca Memori Tersimpan
VI Kết quả đo được lưu trong bộ nhớ
MS Bacaan yang Disimpan dalam Memori
Up to 100 readings are stored. **HI** 100 रीडिंग्स तक संग्रहित stored.
ZH-TW 最多可儲存 100 組數值。
KO 60 회의 측정값을 저장 합니다.
MY ဖတ်ပြချက် 100 အထိ သိမ်းထားသည်
HI 100 रीडिंग्स तक संग्रहित करता है।
TH จัดเก็บการอ่านสูงสุด 100 รายการ
ID Hingga 100 bacaan disimpan.
VI Lưu trữ được lên đến 60 kết quả đo.
MS Sehingga 100 bacaan disimpan.

11.2 Average of the Latest 2 or 3 Readings Taken within a 10 Minute Span
ZH-TW 10 分鐘內最新 2 或 3 次數值的平均值
KO 10 분 이내에 측정한 2 회 또는 3 회의 평균 측정값
MY 10 မိနစ် အတွင်းအတာအတွင်း ရယူထားသည့် ချောက်ဆုံး ဖတ်ရှုမှု 2 ခါ သို့မဟုတ် 3 ခါ၏ပျမ်းမျှ
HI 10 मिनट की अवधि में लेी गई नवीनतम 2 या 3 रीडिंग्स का औसत
TH ค่าเฉลี่ยของค่าที่วัดได้ 2 หรือ 3 ครั้งล่าสุดภายในระยะเวลา 10 นาที
ID Rata-rata 2 atau 3 Pembacaan Terakhir yang dilakukan dalam Jangka 10 Menit
VI Trung bình từ 2 hoặc 3 kết quả đo gần nhất đã tiến hành đo mỗi 10 phút
MS Purata 2 atau 3 Bacaan Terkini Yang Diambil dalam Selang Masa 10 Minit

11.3 Deleting All Readings
ZH-TW 刪除所有數值
KO 저장된 측정값 모두 삭제
MY ဖတ်ရှုမှုအားလုံးကိုဖျက်ခတ်ခြင်း
HI सभी रीडिंग्स को हटाना
TH การลบค่าทั้งหมด
ID Menghapus Semua Pembacaan
VI Xóa tất cả kết quả đo
MS Memadamkan Semua Bacaan

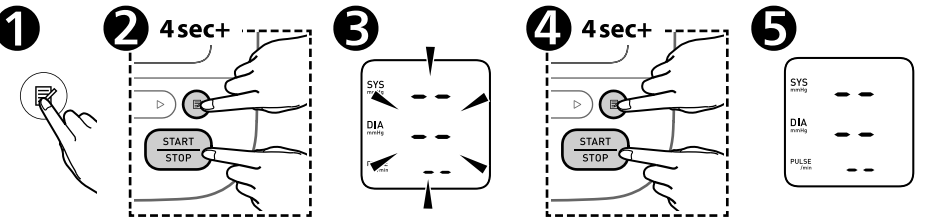


12 Other Settings	
ZH-TW 其他設定	TH การตั้งค่าอื่นๆ
KO 초기 설정	ID Pengaturan Lainnya
MY အခြား ဆက်တိုက်များ	VI Cài đặt khác
HI अन्य सेटिंग	MS Tetapan Lain

12.1 Disabling/Enabling Bluetooth*
ZH-TW 關閉／開啟 Bluetooth*
KO Bluetooth* 끄기 / 켜기
MY Bluetooth* ကို ဝိတ်ခြင်း/ဖွင့်ခြင်း
HI Bluetooth* को अक्षम/सक्षम करना
TH การปิด/เปิดใช้งาน Bluetooth*
ID Matikan/Menghidupkan Bluetooth*
VI Tắt/bật Bluetooth*
MS Menyahdayakan/Mendayakan Bluetooth*

Bluetooth is enabled by default.
ZH-TW 預設啟用 Bluetooth。
KO Bluetooth는 기본 설정으로 활성화되었습니다.
MY Bluetooth ကို မူလအတိုင်းအရ ဖွင့်ထားသည်
HI Bluetooth को डिफॉल्ट रूप से सक्षम किया गया है
TH Bluetooth เปิดใช้งานโดยค่าเริ่มต้น
ID Bluetooth diaktifkan secara default.
VI Bluetooth được bật theo mặc định.
MS Bluetooth didayakan secara lalai.

12.2 Restoring to the Default Settings
ZH-TW 還原為預設設定
KO 초기 설정으로 복원
MY မူလဆက်တိုက်ကို ပြန်လည်ရယူခြင်း
HI डिफॉल्ट सेटिंग पुनर्स्थापित करना
TH การคืนค่าการตั้งค่าเริ่มต้น
ID Memulihkan ke Pengaturan Default
VI Khôi phục cài đặt mặc định
MS Memulihkan Tetapan Lalai

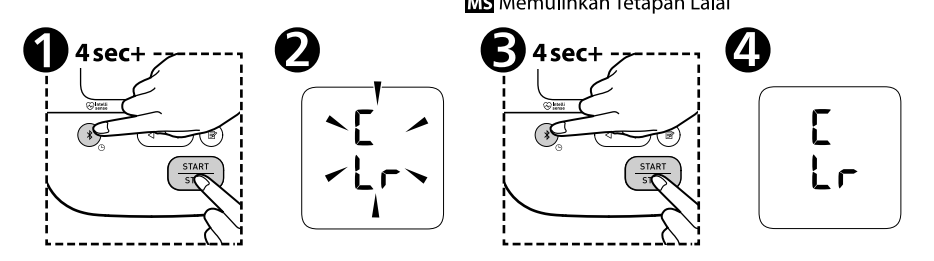


13 Optional Medical Accessories	
ZH-TW 選購的醫療配件	TH อุปกรณ์เสริมทางการแพทย์
KO 별매품	ID Aksesori Medis Opsional
MY ရွေးချယ်နိုင်သော ဆေးဝါးကုသမှုဆိုင်ရာ တွဲဖက်ပစ္စည်းများ	VI Phụ kiện y tế tùy chọn
HI वैकल्पिक चिकित्सा एक्सेसरीज़	MS Aksesori Perubatan Pilihan



Do not throw the air plug away. The air plug can be applicable to the optional cuff.
ZH-TW 不要扔掉進氣接頭。進氣接頭可適用於另售的壓脈帶。
KO 에어플러그는 버리지 마십시오. 별매품 커프에 사용될 수 있습니다.
MY လေလုပ်ပုံကို အဝေးသို့လွှင့်မပစ်ပါနှင့်။ လေလုပ်အား ရွေးချယ်နိုင်သောလက်ပတ်တွင် အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
HI एयर प्लग को नहीं फेंकें। एयर प्लग वैकल्पिक कफ में लगाया जा सकता है।
TH อย่าทิ้งท่อส่งอากาศทิ้งไป ท่อส่งอากาศสามารถใช้กับผ้าพันแขนเสริม
ID Jangan buang sumbat udara. Sumbat udara dapat dipasang pada manset opsional.
VI Không được vứt đầu nối ống khí đi. Đầu nối ống khí có thể được dùng cho vòng bít tùy chọn.
MS Jangan buang palam udara. Palam udara boleh digunakan pada kaf opsyenal.

14 Other Optional Parts
ZH-TW 其他選購配件
KO 기타 옵션 부품
MY အခြားသော ရွေးချယ်နိုင်သည့် အပိုင်းများ
HI अन्य वैकल्पिक भाग
TH ชิ้นส่วนเสริม
ID Komponen Opsional Lainnya
VI Các bộ phận tùy chọn khác
MS Bahagian Pilihan Lain

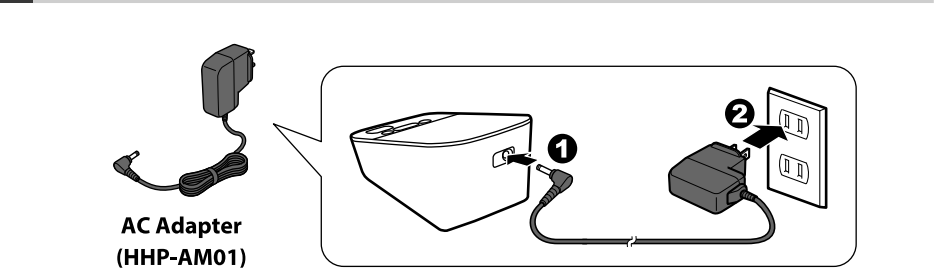

https://www.omronhealthcare-ap.com/		
Manufacturer 製造商 歐洲客服中心	निर्मितా ผู้ผลิต Produšen	Nhà sản xuất Pengilang
EC REP	EU-代表 歐洲代表 EU-Representative	Perwakilan UE Đại diện - EU Wakil UE
Importer in EU 歐盟進口商	EU 代表 EU 代表 EU 代表	Importir di UE Nhà nhập khẩu tại EU Pengimport di EU
Asia Pacific HQ 亞太地區總部 亞洲總公司	एशिया प्रशांत मुख्यालय สำนักงานใหญ่ในเอเชีย Kantor Pusat Asia Pasifik	Trụ sở Khu vực Châu Á Thái Bình Dương Ibu Pejabat Asia Pasifik
Production Facility 製造廠名稱 歐洲總工廠	उत्पादन सुविधा โรงงานผลิต Fasilitas Produksi	Cơ sở sản xuất Kemudahan Pengeluaran
Importer in Republic of Korea 수입판매원	한국오르본헬스케어 (주) 서울특별시 서초구 강남대로 465, A 동 18 층 (서초동, 교보타워) 오르본 고객센터 센터 (1544-5718)	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN
OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpis 33, 2132 LR Hoofddorp, THE NETHERLANDS www.omron-healthcare.com	OMRON HEALTHCARE SINGAPORE PTE LTD. 438A Alexandra Road, #05-05/08 Alexandra Technopark, Singapore 119967 www.omronhealthcare-ap.com	OMRON HEALTHCARE KOREA Co., Ltd. A-dong 18F, 465, Gangnam-daero, Seocho-gu, seoul, Korea Customer Service Center(1544-5718) www.omron-healthcare.co.kr
台灣歐姆龍健康事業股份有限公司 www.omronhealthcare.com.tw 若有問題，或欲購買其他產品及消耗品，請來電諮詢歐姆龍客服中心 客服專線：0809-080-980	Issue Date / 發行日期 / 발행 일자 / 歐洲總工廠 / 歐洲總工廠 / 歐洲總工廠 / 2020-06-30	Made In Vietnam / 越南製造 / 越南製造 / 越南製造 / 越南製造 / 越南製造 / 2020-06-30